歩行動画トリミングツール ロックイット



ひとりでも 簡単!「10m歩行」動画作成



- **遠くの患者さんを大きくズーム!とにかく観察しやすい!**
- 患者さんを、常に同じスケールで、常に画面中央へ!
- 矢状面の撮影動画でもOK!
- 簡単操作で、コンピュータに不得意な人でもラクラク作業!
- モザイク処理で、学会などでの発表用途でも安心!

定価(税込): ダウンロード版 36,300円 パッケージ版 57,200円



Loc-IT (ロックイット)

●前額面のトリミング

カメラに向かってくるように撮影した映像から・・



患者さんを常に同じスケールでトリミング! 同じ大きさなので、左右の動揺が観察しやすくなります。

モザイクでプライバシー保護



モザイクの挿入位置は 次の3タイプを用意。

※モザイクの細かさと サイズは固定です。









※赤色の部分が モザイク領域

● 矢状面のトリミング

カメラを横切るように撮影した映像から・・

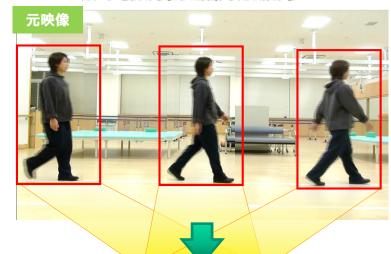

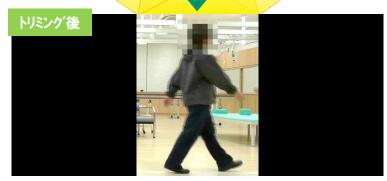

患者さんを常に画面中央ヘトリミング! 左右に動かないので観察しやすくなります。

■ソフトウエア仕様

入力ファイル※ mpg, avi, mod, wmv, ram 出力ファイル avi, wmv, mpg, mp4, mov モザイクサイズ 固定

対応OS Windows 7/8/8.1/10 出力動画サイズ 640×480, 1024×768,

1440×1080

※<u>お手持ちの動画の入力が可能か、必ず試用版にて</u> ご確認ください。

ホームページから試用版をダウンロードできます。 是非、ロックイットをお試しください。

ロックイット



開発・販売元



本社: 〒390-1293長野県松本市和田4010-10 TEL: 0263-40-1122 FAX: 0263-48-1284 URL : http://www.kicnet.co.jp/medical/ E-Mail: motion@comtec.kicnet.co.jp